



testo 622
卓上式温湿度・気圧計

取扱説明書



1. 目次

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 1. | 目次..... | 3 |
| 2. | 安全上のご注意..... | 4 |
| 2.1 | 説明書について..... | 4 |
| 2.2 | 安全上のご注意..... | 5 |
| 2.3 | 環境の保護..... | 5 |
| 3. | 仕様..... | 5 |
| 3.1 | 用途..... | 5 |
| 3.2 | 出荷時の製品構成..... | 6 |
| 3.3 | テクニカル・データ..... | 6 |
| 4. | 各部の名称と機能..... | 7 |
| 4.1 | 概要..... | 7 |
| 4.2 | 電源と設置..... | 9 |
| 5. | 計測の準備..... | 9 |
| 6. | 製品の使用方法..... | 10 |
| 6.1 | 最初の設定..... | 10 |
| 6.2 | 限界値の再設定..... | 11 |
| 6.3 | 設定..... | 11 |
| 6.4 | 設定メニューのフローチャート..... | 12 |
| 6.5 | 計測..... | 15 |
| 7. | メンテナンス..... | 17 |
| 8. | トラブルシューティングとアクセサリ..... | 18 |
| 8.1 | アクセサリとスペア・パーツ..... | 18 |
| 8.2 | トラブルシューティング..... | 18 |


2. 安全上のご注意

2.1 説明書について

はじめに

- > ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解ください。特に、人が傷害を負ったり、製品の損傷を防止するため、安全上のご注意や警告は必ずお読みください。
- > この説明書は、いつでも、すぐに見ることができるようお手元に置いてお使いください。
- > この説明書は、製品とともに後任担当者に必ずお引継ぎください。

記号とその意味

| 文字・記号 | 説明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 警告は下記のような文字と説明で表示されます。マークの横の文字は危険の度合いを示します。 警告! 人が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。 注意! 人が傷害を負ったり物的損害が発生することが想定される内容を示しています。 > すべての警告を注意深くお読みいただき、危険のない安全な計測をお心がけください。 |
| i | 取り扱い上の注意や重要事項に関する情報です。 |
| 1. ... | 操作: 番号に従い順を追って操作していきます。 |
| 2. ... | |
| > ... | 操作: 単独の操作あるいはオプションの操作です。 |
| - ... | 操作の結果を示します。 |
| Menu | ソフトウェアによりディスプレイ上に表示される文字や記号などを表します。 |
| [Set] | 計測器のコントロール・キーあるいはプログラム・インタフェース用ボタンを表します。 |
| | メニュー内の機能/パスを示したものです。 |
| "..." | 入力内容の例を示したものです。 |

2.2 安全上のご注意

- > 溶剤（例えばアセトンなど）と一緒に保管しないでください。また、乾燥剤を使用しないでください。
- > 閉鎖された、乾燥した部屋内でご使用ください。雨や霧などに当てないでください。
- > テクニカル・データに記載されている限度内の計測にご使用ください。無理な力を加えないでください。

2.3 環境の保護

- > 使用済みの電池は所管自治体の定めに従って処分してください。
- > 本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるいは電子製品の廃棄方法の定めに従って処分してください。

3. 仕様

3.1 用途

testo622 卓上式温湿度・気圧計は、研究所の実験（試験）室や校正試験室の室内環境条件のモニタリング用計測器として開発されています。温度や湿度、気圧などがディスプレイ上に表示され、一目で確認できます。

壁面に掛けたり、作業台上に置くこともできます。

3.2 出荷時の製品構成

testo 622 は下記の製品構成で出荷されます。

- testo 622 卓上式温湿度・気圧計（製品型番：0560 6220）
- 取扱説明書
- 出荷検査証
- 壁面取付用ねじ
- 保証書
- 単3型乾電池（AA）× 4本

3.3 テクニカル・データ

| 項目 | 仕様 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計測項目 | 温度 / 湿度 / 気圧(絶対圧) |
| 計測単位 | °C %RH, td, wb hPa, mbar, kPa, in Hg, in H ₂ O, psi |
| 分解能 | 温度: 0.1 °C 湿度: 0.1 %RH 気圧(絶対圧) : 0.1 hPa |
| 計測範囲 | 温度: -10 ~ +60 °C 湿度: 0 ~ 100 %RH (結露なきこと) 気圧(絶対圧) : 300 ~ 1200 hPa |
| 精度 | 温度: ±0.4 K + 1 デジット 湿度: ±2 %RH + 1 デジット(25 °C (10~90 %), ±3 %RHその他の範囲 気圧(絶対圧) : ±3 hPa + 1 デジット |
| 計測頻度 | 10 秒間隔 |
| 稼働温度 | -10 ~ +60 °C |
| 保管温度 | -20 ~ +60 °C |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 電源 | 単 3 形乾電池(AA) × 4 本 |
| 電池寿命 | 約 12 カ月 |
| ケース材質 | ABS |
| 保護等級 | IP 30 |
| 質量 | 約 240g (電池を除く) |
| 寸法 (L×W×H mm) | 185×105×36 185×112×47 (自立用スタンド展開時) |
| 適合 EC 指令 | 2014/30/EC |





4. 各部の名称と機能

4.1 概要



① キーボード

| キー | 機能 |
|------------|---------|
| Max | 最高値の表示 |
| Min | 最低値の表示 |
| %rH | 湿度単位の設定 |
| hPa | 圧力設定の表示 |
| ▲ | 設定の変更 |

| キー | 機能 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 設定の変更 |
|  | 設定の確認 |
|  | 入力の取消し |
|  | アラームの確認 |

② センサ



- ③ 壁面引掛け用穴
- ④ 電池ボックスのフタ(内部に調整ソフト用コネクタ有り)
- ⑤ 自立用スタンド(壁面固定用具を兼ねる。折りたたみ式)

4.2 電源と設置

電源

次の2種類の電池が使用可能です:

- 単3型の乾電池または充電電池、4本

壁掛け

上部と下部穴の間隔を63mm開けて、穴を開けてください。

5. 計測の準備

保護フィルムを剥します。

- > ディスプレイ画面に貼ってある保護フィルムを剥します。

電池を入れます。

1. 計測器裏面の電池ボックスのフタを開けます。
2. 乾電池または充電電池を入れます。(極性にご注意ください)
3. 電池ボックスのフタを閉めます。

6. 製品の使用方法

6.1 最初の設定

まず初めに、日付と時間の設定が必要です。

1. 電池を入ると、ディスプレイ右下に DD.MM.YYYY が点滅します。

i 30秒間以上ボタンを何も押さないと、計測値の表示に変わります。この時は、設定メニュー（6.3設定）で日付と時間の設定を行なってください。

2. **[◀]**または**[▶]**キーを押して、設定オプションを選択し、**[Set]**キーを押して確定します。（設定項目とオプションに関しては下表を参照）
> 次の設定項目が点滅します。

i 数値の増減速度を速めるには、**[◀]** または **[▶]** キーを押して、そのまま押し続けます。

- 湿度単位の設定が終了すると、設定内容は計測器に保存され、計測器は計測値の表示に変わります。（日時が正しく表示されていることを確認してください）

| ディスプレイ | 機能 | 設定オプション |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| DD.MM.YYYY が点滅 または MM.DD.YYYY が点滅 | 日付の表示形式 設定 | DD.MM.YYYY = 日、月、年 MM.DD.YYYY = 月、日、年 |
| 年が点滅 | 年の設定 | 2009 - 2099 |
| 月が点滅 | 月の設定 | 01 - 12 |
| 日が点滅 | 日の設定 | 01 - 31 |
| 24H または 12H (AM/PM)が点滅 | 時間表示形式の 設定 | 24h/12h |
| 時が点滅 | 時の設定 | 00 - 23 または 01 - 12 |
| 分が点滅 | 分の設定 | 00 - 59 |
| 秒が点滅 | 秒の設定 | 00 - 59 |
| °C が点滅 | 温度単位の設定 | °C |

i 電池を抜いた状態で3分以上放置すると、出荷時の設定に戻せます。

6.2 限界値の再設定

温度

温度単位を変更すると、設定した限界値も新しい単位に変換されます。限界値の再設定は不要です。

湿度

湿度単位 (%、td、wb) を変更したとき、設定済み限界値は新しい単位に変換されません。設定メニューによる限界値の再設定が必要です。

([%RH] キーで限界値を設定する湿度単位を表示させてから、設定メニューに切り替えてください)

気圧 (絶対圧)

気圧 (絶対圧) の限界値設定はできません。

6.3 設定

1. 設定メニューに切り替えるため、[Set] キーを約2秒間押し続けます。
 - > 設定メニューの先頭の設定項目が点滅します。
2. [Set] キーを押して、必要な機能を選択します。
3. [◀] または [▶] キーを押して値を設定し、[Set] キーを押して確定します。
(設定順序に関しては次ページの図を参照してください)
- > 次の設定項目が点滅します。

i スクロールを高速で前進または後退するには、[◀または▶] キーを押し続けます。

30秒間キーが何も押されないと、自動的に現在計測値の表示に戻ります。それまで行った設定は何も保存されません。


[Esc] キーを押すと、それまで行なった設定をキャンセルして (保存しないで)、計測値の表示に戻ります。

[Set] キーを2秒間押し続けると、それまでの設定を保存して、計測値の表示に戻ります。(以後の設定をスキップできます)

- 全項目の設定が終了すると、設定内容は計測器に保存され、計測器は計測値の表示に戻ります。

i 設定メニューで30秒間キーが何も押されないと、自動的に現在計測値の表示に戻ります。それまで行った設定は何も保存されません。

6.4 設定メニューのフローチャート

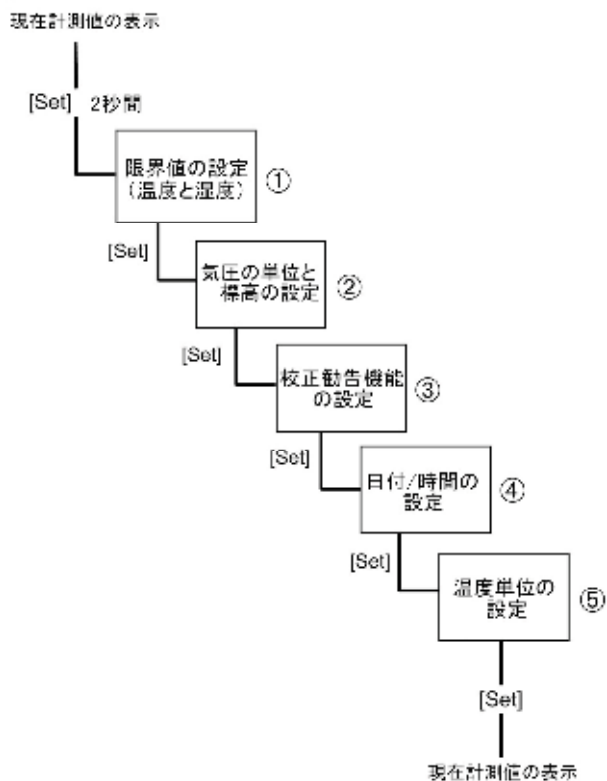

各ステップの詳細な説明は、次ページ以降を参照ください。

| No. | ディスプレイ | 機能 | 設定オプション |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| ① | 🔦 および °C が点灯、ON または OFF が点滅 | 温度上限値アラーム表示の起動または停止。 | 停止: OFF 起動: ON |
| | ON が選択されると、上限値が点滅 | 温度上限値アラーム用の上限値設定。 | - |
| | 🔦 および °C が点灯、ON または OFF が点滅 | 温度下限値アラーム表示の起動または停止。 | 停止: OFF 起動: ON |
| | ON が選択されると、下限値が点滅 | 温度下限値アラーム用の下限値設定。 | - |
| | 🔦 および % が点灯、ON または OFF が点滅 | 湿度上限値アラーム表示の起動または停止。 | 停止: OFF 起動: ON |
| | ON が選択されると、上限値が点滅 | 湿度上限値アラーム用の上限値設定。 | - |
| | 🔦 および % が点灯、ON または OFF が点滅 | 湿度下限値アラーム表示の起動または停止。 | 停止: OFF 起動: ON |
| ON が選択されると、下限値が点滅 | 湿度下限値アラーム用の上限値設定。 | - | |
| ② | 気圧の圧力単位が点滅 | 圧力の単位を選択 | mbar, hPa, kPa, inHg, inH ₂ O, psi |
| | Altitude が点灯、標高(海拔高度)の単位が点滅 | 標高(海拔高度)の単位を選択 | m, ft |
| | 2 が点滅 | 標高(海拔高度)を設定 | 単位がメートル: 0~9000 m 単位がフィート: 0~29,527 ft |

| No. | ディスプレイ | 機能 | 設定オプション |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ③ | Calibration! が点灯、 ON または OFF が点滅 | 校正勧告機能の起動または停止。 | 停止・スキップ: OFF 起動: ON |
| | ON が選択されると、 Calibration! が点灯、年が点滅 | 年の設定 | 2009 - 2099 |
| | ON が選択されると、 Calibration! が点灯、月が点滅 | 月の設定 | 01 - 12 |
| ④ | Update date & time? が点灯、 No が点滅 | 日付と時間の再設定 変更無し | 再設定: Yes スキップ: No |
| | Yes が選択されると、 DD.MM.YYYY が点滅 または MM.DD.YYYY が点滅 | 日付形式の設定 | DD.MM.YYYY = 日、月、年 MM.DD.YYYY = 月、日、年 |
| | 年が点滅 | 年の設定 | 2009 - 2099 |
| | 月が点滅 | 月の設定 | 01 - 12 |
| | 日が点滅 | 日の設定 | 01 - 31 |
| | 24H または 12H (AM/PM) が点滅 | 時間表示形式の設定 | 24H/12H |
| | 時が点滅 | 時の設定 | 00 - 23 または 01 - 12 |
| | 分が点滅 | 分の設定 | 00 - 59 |
| | 秒が点滅 | 秒の設定 | 00 - 59 |

| No. | ディスプレイ | 機能 | 設定オプション |
|-----|--------|---------|---------|
| ⑤ | °C が点滅 | 温度単位の設定 | °C |

i 電源供給が中断しても、3分間は設定値がそのまま保存されます。

6.5 計測

最高値の表示

> [Max] キーを押します。

最高値のリセット:

1. 最高温度値あるいは最高湿度値を選択します。
 2. [Max] キーを押し、そのまま約2秒間押し続けます。
- 最高温度値あるいは最高湿度値がリセットされます。

i [Max] キーが30秒以上押されないと、自動的に現在計測値の表示に戻ります。

最低値の表示

> [Min] キーを押します。

最低値のリセット:

1. 最低温度値あるいは最低湿度値を選択します。
 2. [Min] キーを押し、そのまま約2秒間押し続けます。
- 最低温度値あるいは最低湿度値がリセットされます。

i [Min] キーが30秒以上押されないと、自動的に現在計測値の表示に戻ります。

湿度値の表示

相対湿度/露点/湿球温度の表示変更:

[%RH] キーを押します。

i 相対湿度 (%) の限界値を起動していると、[%RH] キーを押しても、露点および湿球温度の限界値は表示されません。

露点あるいは湿球温度の限界値を起動していると、[%RH] キーを押しても、相対湿度 (%) の限界値は表示されません。

気圧の表示

現地気圧 (実測値) と海面気圧 (演算値)、設定標高 (海拔高度) の表示変更:

> [hPa] キーを押します。

アラーム:

上下限アラームを設定していると、計測値がアラーム限界値を超過したときにアラームを発令します。

アラームの発令:

- [Alarm] キーのLED が点滅します。
- 該当する上限超過、あるいは下限超過のシンボル (矢印) が点滅します。

アラームの停止:


- > [Alarm] キーを押します。
- アラーム (LED とシンボルの点滅) が止まります。



アラームが起動しているとき、設定メニューに切り替えると、アラームも停止します。

7. メンテナンス

乾電池または充電電池の交換

ディスプレイ上に  が点灯したら、電池交換が必要です。

i このまま使用していると、ディスプレイが定期的に点滅するようになり、その後完全消灯となります。この場合、各種設定および計測データは消失します。

注意

乾電池/充電電池の極性を間違えて挿入すると、計測器が損傷する恐れがあります!

> 乾電池/充電電池を挿入するときは、極性を間違えないようご注意ください。

1. 計測器背面の電池ボックスのフタを取り外します。
2. 電池ボックスから古い乾電池または充電電池を取り外し、新しい乾電池または充電電池(単3型×4本)を入れます。
 - 計測器の電源が自動的に入ります。
3. 電池ボックスのフタを取付けます。

i 電池の交換で電源供給が中断しても、各種設定は最長3分間そのまま残ります。

i 計測器を長期間にわたり使用しないときは、計測器や乾電池/充電電池の損傷を防ぐため、乾電池/充電電池を本体から取り外してください。

計測器のクリーニング

> 計測器のハウジングが汚れたときは、湿った布で拭いてください。

強力な洗剤や溶剤は使用しないでください! 弱い家庭用洗剤あるいは石鹸を使用してください。


i クリーニングに圧縮空気(ダストブローア等のスプレー缶を含む)は使用しないでください。センサが損傷する恐れがあります。

8. トラブルシューティングとアクセサリ

8.1 アクセサリとスペア・パーツ

| 製品名 | 製品型番 |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計; 校正ポイント 11.3 %RH および 75.3 %RH (25℃) | 0520 0206 |
| ISO 湿度校正証明書、校正ポイント 11.3 %RHおよび 75.3 %RH (25℃) | 0520 0006 |

8.2 トラブルシューティング

| エラー状態 | 考えられる原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LO が表示された。 | -20℃以下である。 |
| HI が表示された。 | +70℃以下である。 |
|  が表示された。 | バッテリー寿命は残り約1ヵ月である。 |

ここに記述されていない問題が発生した場合は、お買い上げの販売店またはテスト社サービスセンターへご連絡ください。



株式会社 テストー

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
- サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863
- ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp